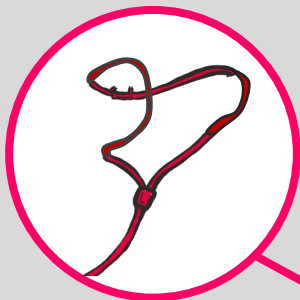


Petit manuel de pose des capteurs d'une polygraphie

Positionner les
lunettes dans les
narines

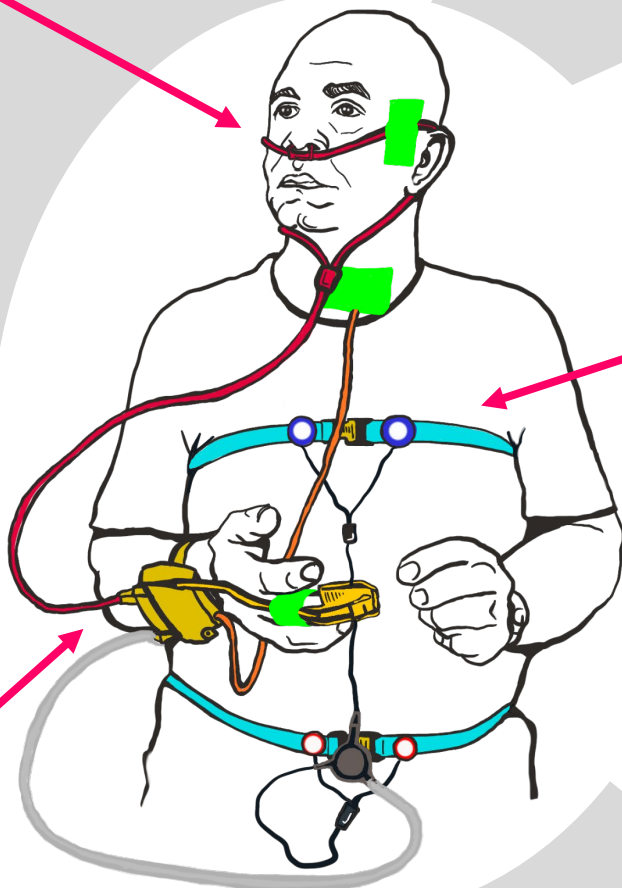


Ne pas oublier
de poser les
bandes
adhésives




Visionnez la vidéo
sur notre chaîne youtube


Passer le tuyau
derrière les oreilles
Repousser la bague
de serrage sous le
menton
Repousser la bague
de serrage sous le
menton



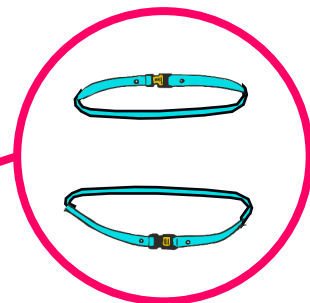Attacher les sangles
avec les boutons-
pression bien visibles



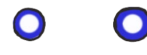Fixer les capteurs sur les
boutons-pression



Bleu en haut (Thorax)

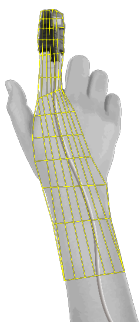


et **rouge** en bas (Abdomen)

Bien entendre
les clics !



Placer le capteur
de préférence à
droite pour les
gauchers et à
gauche pour les
droitiers.


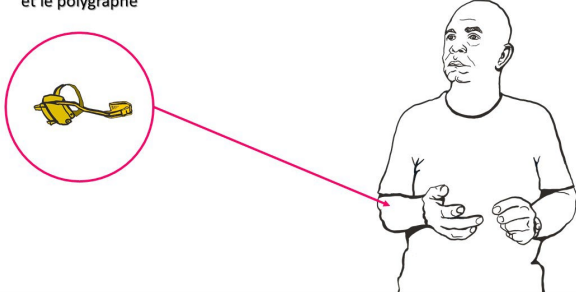

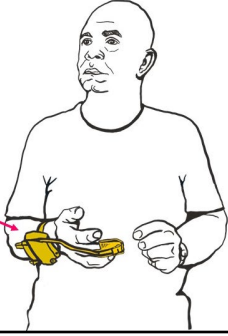


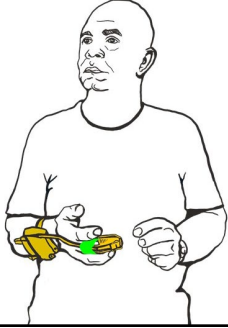

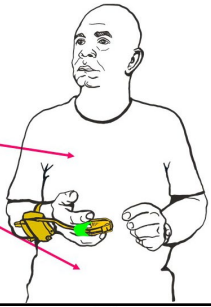

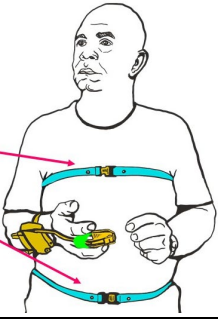

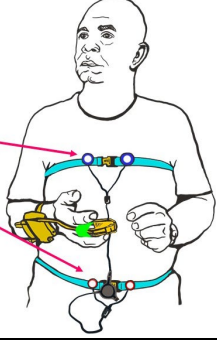

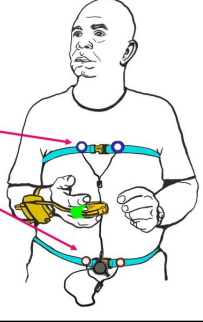

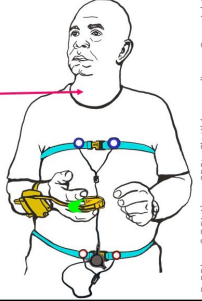


Dans certain cas
le filet élastique
remplacera
l'adhésif pour
maintenir le
capteur en
position



Le lendemain
Ranger le matériel
dans la sacoche


Petit manuel de pose des capteurs d'une polygraphie

<p>1 Le volume d'air</p> <p>La saturation en oxygène</p> <p>Les sons respiratoires</p> <p>La fréquence cardiaque</p>  <p>Les ronflements</p> <p>Les mouvements de la respiration</p> <p>Les apnées / hypopnées</p>	<p>2 Le capteur oxymètre et le polygraphe</p> 
<p>3</p>  <p>Placer le capteur de préférence à droite pour les gauchers et à gauche pour les droitiers.</p> 	<p>4</p> <p>Poser la bande adhésive</p> 
<p>5</p>  <p>Dans certain cas le filet élastique remplacera l'adhésif pour maintenir le capteur en position</p> 	<p>6 Les sangles élastiques</p>  
<p>7</p>  <p>Attacher les sangles avec les boutons-pression bien visibles</p> 	<p>8</p>  <p>Fixer les capteurs sur les boutons-pression</p> <p>Bleu en haut (Thorax) et rouge en bas (Abdomen)</p> 
<p>9</p>  <p>Bien entendre les clics !</p> 	<p>10 Le capteur de son trachéal</p>  

11



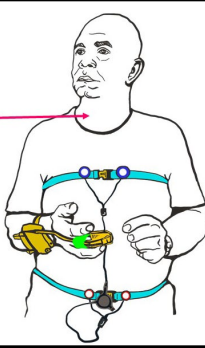
Enlever la rondelle de protection du capteur circulaire



12



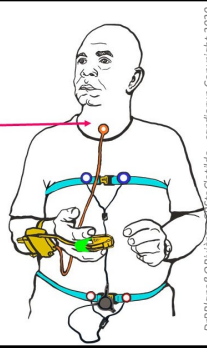
Coller le capteur circulaire au creux de la gorge



DRPBlanc & Olivier - e-Science-Canada - cariforum Copyright 2020


13

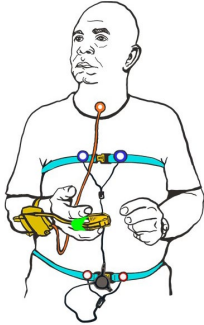Poser la bande adhésive



14

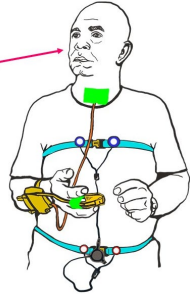
Les lunettes nasales



15



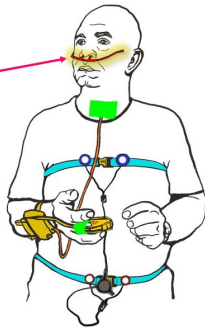
Positionner les lunettes dans les narines



16



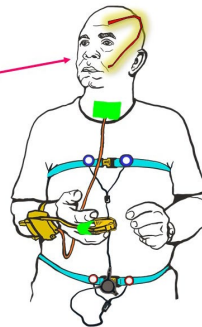
Passer le tuyau derrière les oreilles



17



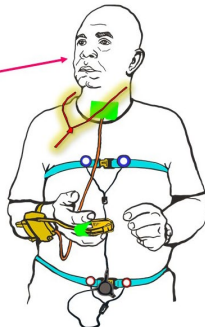Repousser la bague de serrage sous le menton



18

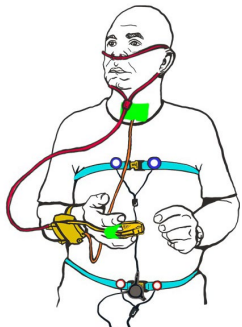


Repousser la bague de serrage sous le menton




19

Poser les 2 bandes adhésives



20

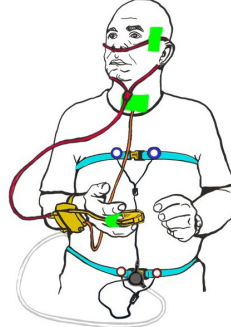Vous êtes complètement équipé



21

Le lendemain
Ranger le matériel dans la sacoche



22

Lors du rangement, mieux vaut s'asseoir et préférer une surface stable pour poser le boîtier (polygraphe)

